

**Heat Protective Gloves (silicon)**  
**Hitzehandschuh aus Silikon**  
**09484, 09368**

**INTENDED USE:** Key Surgical® heat protective gloves provide high protection against moderate temperature up to 240° C/464° F (intended for use during removal of products from autoclaves/wash-disinfector).

**PRECAUTION:**

Perform visual inspection for usability and cleanliness of the heat protective gloves before use

**Note:** Damaged gloves no longer provide protection and must be replaced.

**APPLIED STANDARDS:**

Tested according to:

EN 407:2004-11, DIN EN 420:2010-03 (EN 420:2003+A1:2009)

**CLASSIFICATION:**

Category II per Regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment

**CLEANING AND MAINTENANCE:**

Mechanical reprocessing with or without ultrasound treatment:

**Cleaning and disinfecting chemicals and temperatures:** acidic / neutral / alkaline with or without surfactant additives, chemically at max. 60 °C / 140 °F or with demineralized water, thermally, at max. 93 °C / 199 °F. It is assumed that commercially available products approved for the intended application are used and that the user complies with recommended concentrations, exposure times and temperatures. Demineralized water must be used for the final rinse to ensure no residues are present post-reprocessing.

**Drying:** max. 100 °C / 212 °F

**DISPOSAL:**

There are no special disposal instructions.

**STORAGE CONDITIONS:** Store the product in a dry area away from direct sunlight.

Declaration of Conformity can be found at [keysurgical.com/resources](http://keysurgical.com/resources).

**VERWENDUNGSZWECK:** Key Surgical® Hitzehandschuhe bieten einen hohen Schutz vor moderaten Temperaturen bis zu 240 °C (zur Verwendung bei der Entnahme von Produkten aus Autoklaven/RDG).

**VORSICHTSMASSNAHMEN:**

Führen Sie vor der Verwendung eine Sichtprüfung auf Gebrauchstauglichkeit und Sauberkeit der Hitzeschutzhandschuhe durch.

**Hinweis:** Beschädigte Handschuhe bieten keinen Schutz mehr und müssen ersetzt werden.

**ANGEWENDETE NORMEN:**

geprüft nach: EN 407:2004-11, DIN EN 420:2010-03 (EN 420:2003+A1:2009)

**KLASSIFIZIERUNG:**

Kategorie II nach Verordnung (EU) 2016/425 Persönliche Schutzausrüstung

**REINIGUNG UND PFLEGE:**

Manuelle oder maschinelle Aufbereitung ohne Ultraschallbehandlung

**Chemikalien und Temperaturen zur Reinigung und Desinfektion:** Sauer / neutral / alkalisch > pH 10 mit/ohne Tensidzusatz, chemisch bei max. 60 °C bzw. mit VE-Wasser thermisch bei max. 93 °C: Es wird davon ausgegangen, dass kommerziell erhältliche und für den Anwendungsfall zugelassene Produkte zur Reinigung und Desinfektion verwendet werden. Ebenso, dass die empfohlenen Konzentrationen, Einwirkzeiten und Temperaturen beachtet werden. Es muss sichergestellt werden, dass keine Rückstände auf den Produkten verbleiben. Zur Schlusspülung ist VE-Wasser zu verwenden.

**Trocknung:** max. 100 °C

**ENTSORGUNG:**

Es gibt keine speziellen Entsorgungsvorschriften.

**LAGERBEDINGUNGEN:** Das Produkt an einem trockenen, vor direktem Sonnenlicht geschützten Ort lagern.

Die Konformitätserklärung finden Sie unter [keysurgical.com/resources](http://keysurgical.com/resources).


Tested against thermal hazards & meet minimum requirements x2xxxx  
Protection against contact heat Performance level 2: 250°C/ 482° F / 15 Sek

Geprüft gegen thermische Gefahren & erfüllen Mindestanforderungen x2xxxx

Schutz vor Kontaktwärme Leistungsstufe 2: 250°C/ 15 Sek



x2xxxx

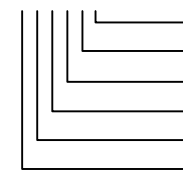

Large molten metal splinters / große geschmolzen Metallsplitter  
Small molten metal splinters / kleine geschmolzen Metallsplitter  
Radiant heat / Strahlungswärme  
Convective heat / Konvektive Wärme  
Contact Heat / Kontaktwärme  
Burning behaviour / Brennverhalten

The marking "X" instead of a number means that the glove has not been tested for the corresponding risk.

Die Kennzeichnung "X" anstelle einer Zahl bedeutet, dass der HAndschuh für das entsprechende Risiko nicht geprüft wurde.



**MANUFACTURER: KEY SURGICAL LLC**  
8101 WALLACE ROAD / EDEN PRAIRIE, MN 55344 / USA  
PH: 800.541.7995 KEYSURGICAL.COM

**EU IMPORTER: KEY SURGICAL GMBH**  
ZUM WINDPARK 1  
23738 LENSAAH, GERMANY  
TEL: +49 4363 905900 KEYSURGICAL.DE



MDSS GMBH  
SCHIFFGRABEN 41, D-30175 / HANNOVER, GERMANY

