





DUOSWIFT®

Die DuoSwift Reinigungs- und Lamellenbürste besteht aus einer am oberen Ende spitz zulaufenden Nylonbürste sowie einer Reihe von Lamellen am unteren Bürstenende. Mit den letzteren lassen sich Restablagerungen aus flexiblen Endoskopen hervorragend entfernen.

VORTEILE:

- Mit dem Borstenteil können festsitzende Keime (Bioburden) durch Bürsten gelöst und entfernt werden
- Mit den Lamellen werden Flüssigkeiten und Reststoffe zuverlässig aus dem Endoskopkanal gezogen
- Das einzigartige Design fördert die maximale Reinigungswirkung innerhalb der kompatiblen Endoskopkanäle

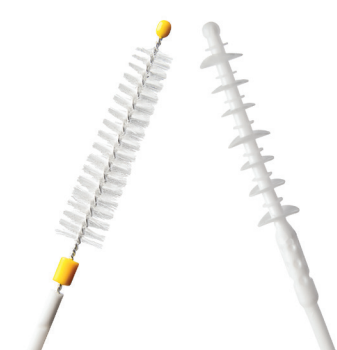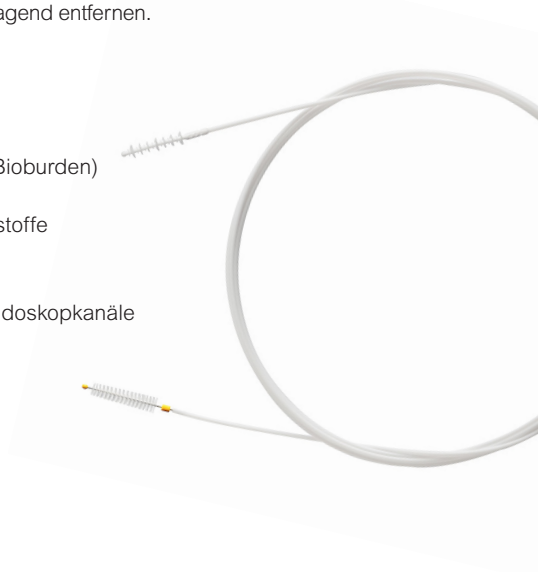

REF	BESCHREIBUNG	BORSTEN Ø (mm)	KANALGRÖSSE (mm)	VE
BX00711618	DuoSwift Reinigungs- und Lamellenbürste	5-7	2,5-5,2	50 Stk.
BX00711619	DuoSwift Reinigungs- und Lamellenbürste mit Reinigungsbürste für den Steueringkopf	5-7 / 10	2,5-5,2 (Lamelle)	50 Stk.

